

Lähetysaikataulu:

- Tämä testi tulee lähettää maanantaina tai tiistaina ja näyte tulee lähettää 24tunnin sisällä, mielellään heti näytteenottopäivänä.
- Lähetä näyte niin pian kuin mahdollista. Pidä näyte huoneenlämmössä kunnes olet valmis lähettämään sen.
- Näytteen tulee saapua Nordicille arkipäivänä, koska olemme viikonloppuisin suljettu.

Kun olet valmis lähettämään näytteen

- Varmista, että seuraavat tiedot on annettu:
 - Henkilötietolomake, jossa täytettynä näytteenottopäivämäärä sekä käyttämäsi lääkkeet ja ravintolisät.
 - Pro-forma-laskut (vain, jos lähetät EU:n ulkopuolelta).
- Valmistele lähetys:
 - Laita pussi, jossa verinäyte lähetyslaatikkoon täytetyn henkilötietolomakkeen kanssa.
 - Laita laatikko DHL- pussiin ja lähetä (ks. Lähetysohjeet).



Testipakettisi, ole hyvä!

Tickplex Plus - Nordic Laboratories - antaa tärkeää tietoa terveytesi liittyen.

Henkilökohtainen hoitostrategia on lääketieteen tulevaisuutta. Se perustuu yksilölliseen biokemiaan ja geeniperimään liittyviin tietoihin. Tämä testi auttaa sinua hankkimaan objektiivista tietoa itsestäsi sekä luomaan tarkemman hoitostrategian ja toteuttamaan muutoksia, jotka johtavat parempaan terveydentilaan.

Tämä testipakkaus sisältää kaiken, mitä tarvitset näytteenottoon. Lue ohjeet huolellisesti ja seuraa niitä vaihe vaiheelta. Testituloksesi on lääkärin / terapeutin nähtävänä noin kolme viikkoa sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet näytteen.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea testin tekemiseen, voit ottaa yhteyttä 045 1494 777 tai sh@nordic-labs.com

Tarkista testipaketin sisältö

Tärkeä:

Huomaa, että tätä testiä varten tarvitaan lääkärin tai hoitajan ottama verinäyte. Lue valmistelu- ja lähetysohjeet huolellisesti ennen kuin varaat ajan laboratoristiosta.

Lähetysmateriaalit

- 1 x Laatikko, joka sisältää näytteenottotarvikkeet (säilytä näytteiden palauttamista varten)
- 1 x Muovikotelo näyteputkille (säilytä näytteiden palauttamista varten)
- 1 x Lähetysohje
- 1 x Henkilötietolomake
- 1 x DHL- lähetuspussi
- 1 x DHL- rahtikirja
- 2 x Pro-forma-lasku (vain kun palautus EU:n ulkopuolisesta maasta)

Jos jotain puuttuu tai on vanhentunut, otathan yhteyttä +44 15 80 20 16 87 tai testkits@nordicgroup.eu

Näytteenottomateriaalit

Verinäyte

- 1 x Seeruminerotteluputki (SST-putki)
- 1 x Suljettava pussi



Nygade 6, 3.sal • 1164 Copenhagen K • Denmark • Tlf: +45 33 75 10 00

info@nordic-labs.com • www.nordic-labs.com

Huomaa, että näytteenotto-ohjeita on seurattava huolellisesti. Muutoin tulokset saattavat viivästyä tai lisäkuluja voi aiheutua uudesta näytteestä.

Valmistelu

Tarvitsemme seuraavat tiedot

- Henkilötietolomake: tarkista, että lomakkeella olevat tiedot ovat oikein ja muokkaa niitä tarvittaessa. Merkitse ylös myös käyttämäsi lääkkeet ja ravintolisät.

Näytteenoton ajoitus:

- Näyte tulee ottaa maanantaina tai tiistaina. Näyte täytyy lähettää näytteenottopäivänä (maanantai tai tiistai).
- Varaa verinäytteenotto laboratorioon maanantaiksi tai tiistaiksi ennen klo 14 ja lähetä näyte samana päivänä kuin näytteenotto.
- Ilmoita lääkärille / näytteenottajalle miten näyte valmistellaan ja lähetetään mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Varmista, että näyte voidaan tarvittaessa pitää kylmänä / pakastaa.
- Näytteenottopäivänä, ennen näytteenottoa, soita DHL: lle (katso lähetysohjeet) ennen kello 14.00 ja järjestä nouto lääkärin tai näytteenottajan luota. (Vaihtoehtoisesti voit järjestää noudon omasta osoitteestasi.)
- DHL: llä on 3 tunnin aikaikkuna noudoille. Kerro heille, että lähetyksen on noudettava ennen klo 17.00

Ennen näytteenottoa

- Älä koskaan lopeta lääkärin määräämiä lääkkeitä ilman lupaa.

Näytteenotto-ohjeet

Verinäytteenotto

Tärkeää: Näytteenotto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan ammattilaiselle kuten lääkärille tai hoitajalle.



Vaihe 1:

Valmistelee potilas verinäytteenottoa varten.



Vaihe 2:

Ota verta SST-putkeen.




Vaihe 3:

Kääntelee SST-putkea viisi kertaa, jotta hyytymisenestoaine sekoittuu näytteen kanssa. Älä sentrifuugaa tai pakasta verta.



Vaihe 4:

Säilytä SST-putkea pystyasennossa 30 minuuttia ennen kuin laitat sen muovikoteloon.

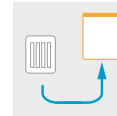

Vaihe 5:

Aseta näyteputki muovikotelossa pussiin ja sulje se.