

Lähetysvalmistelut

Lähetysaikataulu

- Lähetä näyte niin pian kuin mahdollista. Älä lähetä näytettä torstaina tai perjantaina, koska olemme viikonlopun suljettuna.

Kun olet valmis lähettämään näytteen

- Varmista, että seuraavat tiedot on annettu: Henkilötietolomake täytettynä ja tarkistettuna.
- Pro-forma-lasku (vain, jos lähetät EU:n ulkopuolelta).

Valmistele lähetys:

- Lääkäri / näytteenottaja laittaa henkilötietolomakkeen ja näytteen mukana tulleeeseen laatikkoon. Laatikko laitetaan DHL lähetyspussiin.
- Laita täytetty henkilötietolomake ja biovaarapussi, jossa näyte lähetyslaatikkoon.
- Laita laatikko DHL- pussiin ja lähetä (ks. Lähetysohjeet).



Nordic Laboratories

Liposcan & Oxidised LDL

FIN

Testipakettisi, ole hyvä!

Liposcan (HDL & LDL Subfractions) tai Oxidised LDL testi - Nordic Laboratories - antaa tärkeää tietoa terveyteesi liittyen.

Henkilökohtainen hoitostrategia on lääketieteen tulevaisuutta. Se perustuu yksilölliseen biokemiaan ja geeniperimään liittyviin tietoihin. Tämä testi auttaa sinua hankkimaan objektiivista tietoa itsestäsi sekä luomaan tarkemman hoitostrategian ja toteuttamaan muutoksia, jotka johtavat parempaan terveydentilaan.

Tämä testipakkaus sisältää kaiken, mitä tarvitset näytteenottoon. Lue ohjeet huolellisesti ja seuraa niitä vaihe vaiheelta. Testituloksesi on lääkärin / terapeutin nähtävänä noin kolme viikkoa sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet näytteen.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea testin tekemiseen, voit ottaa yhteyttä 045 1494 777 tai sh@nordic-labs.com.

Tärkeää:

Huomaa, että verinäytteen voi ottaa vain lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Ole hyvä ja lue lähetysvalmistelut ja -ohjeet huolellisesti ennen kuin tilaat ajan näytteenottoon.

Tarkista testipaketin sisältö

Lähetysmateriaalit

- 1 x laatikko, joka sisältää näytteenottotarvikkeet (**säilytä tämä laatikko näytteiden palauttamista varten**)
- 1 x lähetysohje
- 1 x Muovinen putkenpidike
- 1 x henkilötietolomake
- 1 x DHL- pussi
- 1 x DHL- rahtikirja
- 2 x Pro-forma-lasku (**vain kun palautus EU:n ulkopuolisesta maasta**)

Näytteenottomateriaalit

- 1 x punaharmaakorkkinen SST-putki
- 1 x kellertävä punakorkkinen kuljetusputki
- 1 x pipetti
- 1 x biovaarapussi, jossa imupaperi



Nygade 6, 3.sal • 1164 Copenhagen K • Denmark • Tlf: +45 33 75 10 00

info@nordic-labs.com • www.nordic-labs.com

© Copyright 2020 Nordic Laboratories. Reproduction may be made for personal use only. Systematic electronic or print reproduction and distribution including duplication of any material in this paper for a fee or for commercial purposes, or modification of the content of the paper are prohibited.

Jos jotain puuttuu tai on vanhentunut, otathan yhteyttä +44 15 80 20 16 87 tai testkits@nordicgroup.eu

Valmistelu

Näytteenoton ajoitus:

- Varaa verinäytteenotto laboratorioon maanantai- keskiviikko ennen klo 14 ja lähetä näyte samana päivänä kuin näytteenotto.
- Ilmoita lääkärille / näytteenottajalle miten näyte valmistellaan ja lähetetään mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Varmista, että näytteen pakastaminen tehdään asianmukaisesti kun varaat ajan.
- Näytteenottopäivänä ja ennen ajanvarausta, soita DHL: lle (katso lähetysohjeet) ennen kello 14.00 ja järjestää nouto lääkärin tai näytteenottajan luota. (Vaihtoehtoisesti voit ottaa valmistellun näytteen mukaan ja pakastaa kotona.)
- DHL: llä on 3 tunnin aikaikkuna noudoille. Anna heille tieto, että lähetyks on noudettava ennen klo 17.00.

Tarvitsemme seuraavat tiedot

- Henkilötietolomake: tarkista, että lomakkeella olevat tiedot ovat oikein ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Ennen näytteenottoa

- Sinun tulee paastota 12 tunnin ajan.
- Älä syö kiinteää ruokaa.
- Juo vain hieman vettä tarvittaessa.

Tärkeää:

Älä koskaan lopeta reseptilääkkeiden käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa.

Tärkeää: Näytteenotto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan ammattilaiselle kuten lääkärille tai hoitajalle.


Näytteenotto-ohjeet



Vaihe 1:


Kirjoita potilaan koko nimi, syntymäaika, sukupuoli sekä päivämäärä ja kellonaika kellertävään kuljetusputkeen. Merkitse näytteenottotiedot myös henkilötiedot lomakkeelle.

Tärkeää: Pyydetty tiedot tulee olla täytetty tarkasti, jotta tulokset voidaan toimittaa luotettavasti.

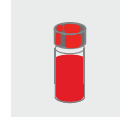

Vaihe 2:

Ota SST putki täyteen laskimoverta.

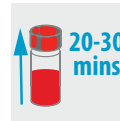


Vaihe 3:

Aseta SST-putki pystyyn telineeseen ja anna veren hyytyä 20-30 minuuttia huoneenlämmössä.




Vaihe 4:

Sentrifugoi SST putki 15 minuutin ajan. Seerumissa ei saa olla sekoittuneena hemolyyssia tai punasoluja.

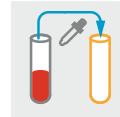

Vaihe 5:

Siirrä seerumi pipetillä seerumi kellertävään kuljetusputkeen. ÄLÄ täytä yli $\frac{3}{4}$ tilavuudesta.

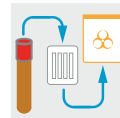

Vaihe 6:

Laita kellertävä putki muoviseen putkenpidikkeeseen ja biovaarapussin sisälle.



Vaihe 7:

Laita biovaarapussi lähetykslaatikkoon. Näyte on nyt valmis lähetettäväksi.